

MinDora

Platform Pendamping Kesehatan Mental Berbasis AI

BAB 6.2

Bukti Pengembangan dan Pengujian

Tech Stack:

Backend:

AI Engine:

Payment:

Deployment:

Aplikasi MinDora terdiri dari 25 halaman (route) yang dapat dikelompokkan menjadi: Autentikasi, Onboarding, Dashboard, Fitur Utama, Manajemen Profesional, Profil & Pengaturan, dan halaman Premium.

- **Tujuan:** Entry point aplikasi; menentukan routing awal berdasarkan status sesi pengguna.
- **Fungsi Utama:** Memeriksa session Supabase — jika sudah login !' /dashboard; jika belum onboarding !' /onboarding; jika sudah onboarding !' /auth/login. Timeout otomatis 2,5 detik.
- **Input Pengguna:** Tidak ada — proses sepenuhnya otomatis.
- **Output:** Logo MinDora, tagline, animasi loading dots (3 titik berpulsa), redirect otomatis.



Screenshot 1 — Splash Screen: Logo MinDora di tengah, background navy, 3 loading dots di bawah

1.2 Onboarding (/onboarding)

- **Tujuan:** Memperkenalkan konsep dan nilai MinDora kepada pengguna baru — hanya tampil sekali.
- **Fungsi Utama:** Menampilkan 3 slide edukatif secara berurutan. Setelah slide terakhir, menyimpan flag mindora_onboarded = '1' ke localStorage lalu redirect ke /auth/register.
- **Input Pengguna:** Tap tombol "Lanjut" (slide 1–2), "Mulai" (slide 3), atau "Sudah punya akun?" (loncat ke login).
- **Output:** Slide 1 (Ø>ÝØ Pendampingan mental) · Slide 2 (Ø=Ü- Curhat tanpa penghakiman) · Slide 3 (Ø<ß1 Tracking & profesional progress dots (3 titik aktif).



Screenshot 2 — Onboarding Slide 1: Emoji Ø>ÝØ, headline "Pikiran penuh? MinDora siap dengerin", progress dot posisi 1



Screenshot 3 — Onboarding Slide 3: Emoji Ø<ß1, headline "Tumbuh bersama, satu hari satu langkah", tombol "Mulai"

1.3 Register (/auth/register)

- **Tujuan:** Pembuatan akun baru untuk pengguna yang belum terdaftar.
- **Fungsi Utama:** Registrasi via email+password (Supabase signUp) atau Google OAuth (PKCE flow). Live validation: 4 password requirements dicek real-time (min 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka).
- **Input Pengguna:** Nama lengkap · Email · Password (dengan live checklist) · Tombol "Daftar" · Tombol "Lanjut dengan Google".
- **Output:** Checklist requirement ' /+ muncul saat fokus/mengetik password; redirect ke /dashboard jika berhasil; konfirmasi email jika email verification aktif.



Screenshot 4 — Register Page: Form nama/email/password, live password checklist (beberapa ' beberapa +)

1.4 Login (/auth/login)

- **Tujuan:** Autentikasi pengguna eksisting ke dalam aplikasi.
- **Fungsi Utama:** Login via email+password (supabase.auth.signInWithPassword) atau Google OAuth. Error handling inline jika kredensial salah.
- **Input Pengguna:** Email · Password · Tombol "Masuk" · Tombol "Lanjut dengan Google".
- **Output:** Pesan error merah inline jika gagal; redirect ke /dashboard jika berhasil.



Screenshot 5 — Login Page: Form email & password, tombol Google OAuth, link "Belum punya akun?"



Screenshot 6 — Login Error State: Pesan merah "Email atau password salah. Coba lagi ya."

1.5 Dashboard / Beranda (/dashboard)

- **Tujuan:** Home screen utama — ringkasan status pengguna dan akses cepat ke fitur inti.
- **Fungsi Utama:** Fetch profiles (full_name, streak, is_premium) dari Supabase. Tampilkan greeting personal, 5 quick mood buttons, shortcut Sesi Cerita, streak card, tip harian (rotasi 4 tip berbeda per hari minggu), dan kartu Mood Forecast (premium/terkunci).
- **Input Pengguna:** Tap quick mood !' redirect ke /checkin · Tap "Mulai Sesi Cerita" !' /chat · Tap Mood Forecast !' /forecast (premium) atau /premium (free).
- **Output:** Nama pengguna dari DB · Tanggal hari ini (format Indonesia) · Streak hari · Tip harian · Badge premium/free.



Screenshot 7 — Dashboard (Free): Greeting "Hei, [Nama] Ø=ÜK", 5 quick mood, card "Mulai Sesi Cerita", Mood Forecast terkunci Ø=Y



Screenshot 8 — Dashboard (Premium): Card Mood Forecast aktif tanpa gembok, badge premium

1.6 Sesi Cerita — AI Chat (/dashboard/chat)

- **Tujuan:** Fitur inti — percakapan emosional dengan MinDora (AI) secara real-time.
- **Fungsi Utama:** Chat dikirim ke Gemini AI via /api/chat. Konteks pengguna (nama, streak, mood terakhir, ai_notes dari sesi sebelumnya) diinjeksikan secara diam-diam di pesan pertama. MinDora memutuskan sendiri kapan menampilkan intensity picker melalui marker [INTENSITY_CHECK]. Zona terdeteksi (hijau/kuning/merah) setelah user pilih skor. Sesi disimpan ke localStorage dan Supabase saat berakhir.
- **Input Pengguna:** Teks bebas · Skor intensitas 1–5 (widget dimunculkan AI) · Tombol "Akhir" di header · Toggle "Simpan sesi ini".
- **Output:** Bubble chat MinDora & user · Typing indicator (3 titik) · Intensity picker widget · Zone result overlay (hijau/kuning) · Smart routing ke psikolog jika zona kuning.



Screenshot 9 — Chat Greeting: Pesan pembuka MinDora "Lagi ada yang berat dipikirin?", input kosong, tombol "Akhir" di header



Screenshot 10 — Chat Percakapan: 3–4 bubble user (kanan) dan MinDora (kiri), respons empatik MinDora terlihat



Screenshot 11 — Chat Typing Indicator: 3 titik animasi di bubble MinDora saat sedang mengetik



Screenshot 12 — Chat Intensity Picker: Widget angka 1–5 muncul dalam alur chat, belum ada yang dipilih



Screenshot 13 — Chat Pasca Intensitas: Balasan MinDora empatik sesuai skor, obrolan berlanjut



Screenshot 14 — Zone Result Hijau: Overlay "Makasih udah cerita hari ini", toggle simpan sesi, tombol "Selesai"



Screenshot 15 — Zone Result Kuning: Overlay "Kamu lagi bawa banyak hal nih", CTA "Ya, hubungkan aku"

1.7 Morning Check-in (/dashboard/checkin)

- **Tujuan:** Pencatatan kondisi harian pengguna dalam 3 langkah terstruktur.
- **Fungsi Utama:** Mengumpulkan data kualitas tidur, mood emosional, dan kekhawatiran. Data disimpan ke tabel mood_entries via Supabase. Streak diperbarui melalui RPC increment_streak(user_id).
- **Input Pengguna:** Step 1: Pilih sleep quality (1–5, dengan emoji) · Step 2: Pilih mood dari 6 opsi (Senang, Biasa aja, Cemas, Sedih, Frustrasi, Overwhelmed) · Step 3: Ya/Tidak ada kekhawatiran + teks bebas opsional.
- **Output:** Progress bar 3 langkah · Summary card setelah selesai (tidur, mood, kekhawatiran) · CTA ke Sesi Cerita.



Screenshot 16 — Check-in Step 1: Progress bar 1/3, 5 pilihan kualitas tidur dengan emoji (🌙, 🌄, 🌅, 🌆, 🌃)



Screenshot 17 — Check-in Step 2: Grid 6 emosi 3×2, salah satu dipilih dengan highlight border biru



Screenshot 18 — Check-in Step 3: Dua tombol Ya/Tidak, textarea terbuka karena "Ya" dipilih



Screenshot 19 — Check-in Selesai: Summary card (tidur 4/5, mood Cemas, kekhawatiran: Ada), CTA "Mulai Sesi Cerita"

1.8 Jurnal (/dashboard/journal)

- **Tujuan:** Visualisasi riwayat check-in dan sesi cerita dalam tampilan kalender bulanan.
- **Fungsi Utama:** Kalender grid 7 kolom × baris bulan. Setiap tanggal yang memiliki data check-in menampilkan emoji mood. Tap tanggal menampilkan detail card di bawah. Navigasi bulan (prev/next). Stats strip menampilkan jumlah check-in, sesi, dan streak.
- **Input Pengguna:** Tap tanggal di kalender · Tap panah !• !' navigasi bulan.
- **Output:** Grid kalender dengan emoji mood (🌙 🌞 🌧️ 🌪️ 🌈 🌟 🌠) per hari · Detail check-in (tidur, mood, kekhawatiran) (zona, intensitas, preview) · Stats strip.



Screenshot 20 — Jurnal Kalender: Grid bulan, beberapa hari berisi emoji mood (🌙 🌞 🌧️ 🌪️ 🌈 🌟 🌠), hari ini disorot



Screenshot 21 — Jurnal Detail Hari: Card check-in (tidur 4/5, mood Cemas) + card sesi (zona kuning, intensitas 3)

1.9 Temukan Profesional (/dashboard/psikolog)

- **Tujuan:** Direktori psikolog dan psikiater mitra MinDora dengan filter dan pencarian.
- **Fungsi Utama:** Filter by tipe (Semua / Psikolog / Psikiater / Tersedia) diproses di frontend. Pencarian by nama atau spesialisasi. Menampilkan 3 profesional (data saat ini statis/mock).
- **Input Pengguna:** Search bar teks · Tap filter chip · Tap kartu profesional !' ke detail · Tap "Buat Janji".
- **Output:** Kartu profesional: avatar inisial berwarna · nama · tier badge (Senior/Middle/Junior) · spesialisasi · rating · ulasan · status tersedia/sibuk · harga per sesi.



Screenshot 22 — Daftar Profesional: Filter chips (Semua/Psikolog/Psikiater/Tersedia), 3 kartu profesional lengkap

1.10 Profil Profesional (/dashboard/psikolog/[id])

- **Tujuan:** Halaman detail profil seorang profesional dengan pemilihan jadwal dan tipe sesi.
- **Fungsi Utama:** Menampilkan profil lengkap: bio naratif, tag spesialisasi, stats (rating, total sesi, universitas asal), harga per sesi, pilihan tipe sesi (Chat/Voice Call/Video Call), dan grid slot jadwal tersedia.
- **Input Pengguna:** Pilih tipe sesi · Tap slot waktu (highlight saat dipilih) · Tap "Buat Janji Sekarang" (disabled jika tidak tersedia).
- **Output:** Profil lengkap · Slot interaktif · Redirect ke /dashboard/booking dengan parameter professional, slot, type.



Screenshot 23 — Profil Psikolog: Avatar, nama+gelar, tag spesialisasi, stats (rating/sesi/univ), tipe sesi, slot jadwal (salah satu)

1.11 Konfirmasi & Pembayaran (/dashboard/booking)

- **Tujuan:** Konfirmasi detail sesi dan proses pembayaran via MidTrans Snap payment gateway.
- **Fungsi Utama:** Tampilkan ringkasan sesi (psikolog, jadwal, tipe, durasi, biaya). POST ke /api/payment/create-token untuk mendapatkan Snap token. Buka window.snap.pay(). Callback onSuccess !' INSERT ke tabel bookings. Webhook MidTrans update payment_status.
- **Input Pengguna:** Centang checkbox setuju syarat · Tap "Konfirmasi & Bayar" (disabled jika belum centang).

Output: Detail sesi · Sandbox notice (otomatis jika kunci SB-) · MidTrans Snap popup · Success / pending state.



Screenshot 24 — Booking Page: Detail sesi, sandbox notice (mode testing + kartu uji), checkbox syarat, tombol bayar



Screenshot 25 — MidTrans Snap Popup: Modal terbuka, pilihan metode pembayaran (kartu kredit, transfer, dll)



Screenshot 26 — Booking Berhasil: Emoji 🎉, "Janji Dibuat!", nama psikolog dikonfirmasi

1.12 Mood Forecast (/dashboard/forecast) +P Fitur Premium

- **Tujuan:** Prediksi mood mingguan berbasis riwayat check-in dan sesi cerita pengguna.
- **Fungsi Utama:** Premium gate: cek profiles.is_premium, redirect ke /premium jika false. Fetch 60 hari mood_entries dan chat_sessions dari Supabase. Merge keduanya (data check-in prioritas atas data sesi). Jalankan algoritma generateForecast() untuk menghasilkan prediksi 7 hari dengan analisis pola per hari dalam seminggu dan probabilitas akurasi.
- **Input Pengguna:** Navigasi minggu !• (ke masa lalu) dan !' (maks +2 minggu) · Tap "Bagaimana akurasi dihitung?" (accordion).
- **Output:** 7-day forecast cards (emoji mood + % akurasi) · Warning hari berat · Prevention plan teks · Mitigasi per hari berat.



Screenshot 27 — Mood Forecast: 7-day cards dengan emoji dan % akurasi per hari, warning hari berat, prevention plan di bawah

1.13 Zona Merah (/dashboard/red-zone)

- **Tujuan:** Halaman respons krisis — diarahkan otomatis saat AI mendeteksi intensitas "e 5 atau kata kunci krisis dalam percakapan.
- **Fungsi Utama:** Menampilkan pesan empati dari MinDora dan opsi bantuan darurat. Link tel: langsung ke hotline Into The Light. Tombol ke psikiater mitra.
- **Pemicu Otomatis:** Kata kunci krisis: "bunuh diri", "mau mati", "tidak mau hidup", "menyakiti diri", "self harm", "suicide", dll. (9 kata) ATAU skor intensitas = 5.
- **Output:** Pesan empati · Tombol "Hubungi Psikiater Mitra Sekarang" · Link telepon 021-7884-5555 (Into The Light) · Tombol lanjut cerita ke MinDora · Tombol Tutup.



Screenshot 28 — Zona Merah: Pesan empati MinDora, tombol psikiater, nomor Into The Light 021-7884-5555 terlihat jelas

1.14 Notifikasi (/dashboard/notifications)

- **Tujuan:** Pusat notifikasi terkait aktivitas pengguna dalam aplikasi.
- **Fungsi Utama:** Fetch 50 notifikasi terbaru dari tabel notifications. Auto-mark-as-read semua notifikasi belum-dibaca saat halaman dibuka. Grouping: Hari Ini / Kemarin / Sebelumnya.
- **Tipe Notifikasi:** checkin_reminder 🕒 · forecast_alert 📊 · booking_confirmed 🎫 · session_reminder 🗓️ · streak_achievement 🏆 · report_ready 📄
- **Output:** Grouped list · Ikon per tipe · Unread indicator (dot biru + border kiri) · Waktu relatif (menit/jam/hari lalu).



Screenshot 29 — Notifikasi: Daftar dengan grouping "Hari Ini / Kemarin", ikon per tipe, dot unread biru

1.15 Profil Utama (/dashboard/profile)

- **Tujuan:** Pusat manajemen akun pengguna dan navigasi ke semua sub-pengaturan.
- **Fungsi Utama:** Fetch profiles (full_name, is_premium, streak, session_count). Hitung level = $\# \text{ session_count} \div 5\# + 1$. Tampilkan user card dengan stats. Menu 4 section: Akun · Premium · Riwayat · Lainnya. Tombol Logout (supabase.auth.signOut).
- **Output:** Avatar inisial · Nama · Badge Premium/Free · Stats (streak, sesi, level) · Menu navigasi lengkap.



Screenshot 30 — Profil: Avatar inisial, nama, badge Premium/Free, stats streak/sesi/level, 4 section menu

1.16 Sub-halaman Profil (8 Halaman)

Halaman	Tujuan	Status
/profile/edit	Edit nama lengkap (email read-only)	' Diimplementasikan
/profile/password	Ganti password (re-auth + update)	' Diimplementasikan
/profile/language	Pilih bahasa ID/EN (EN coming soon)	' Diimplementasikan
/profile/subscription	Status premium + daftar fitur	' Diimplementasikan
/profile/sessions	Riwayat sesi cerita dari chat_sessions	' Diimplementasikan
/profile/about	Info aplikasi, misi, disclaimer	' Diimplementasikan
/profile/privacy	Kebijakan privasi (accordion sections)	' Diimplementasikan
/profile/help	FAQ accordion + info kontak	' Diimplementasikan



Screenshot 31 — Edit Profil: Form nama (terisi), field email disabled/abu-abu, tombol simpan



Screenshot 32 — Status Langganan: Tabel fitur free vs premium, status aktif/terkunci per fitur

1.17 Upgrade Premium (/premium)

- **Tujuan:** Halaman paywall untuk upgrade ke akun premium (Rp 29.000/bulan).
- **Fungsi Utama:** Load MidTrans Snap.js via Next.js Script. Tampilkan perbandingan 8 fitur (3 free, 5 premium). Proses pembayaran via Snap. onSuccess callback !' POST ke backend !' UPDATE profiles.is_premium = true.
- **Output:** 8 fitur dengan tanda ' (free) atau Ø=Ý (premium) · Sandbox notice otomatis jika kunci SB- · Snap popup · Success/Pending state.



Screenshot 33 — Premium Page: 8 fitur free vs premium, harga Rp 29.000/bulan, tombol "Upgrade ke Premium", sandbox notice

2.1 Journey A — Pengguna Pertama Kali

#	Tahap	Aktivitas Pengguna	Tujuan	Respons Sistem	Output
1	Splash Screen	Buka aplikasi	Mulai menggunakan	Cek localStorage + Supabase session	Splash 2,5 detik ! /onboarding
2	Onboarding	Baca 3 slide, tap "Mulai"	Mengenal aplikasi	Set mindora_onboarded di localStorage	Redirect /auth/register
3	Register	Isi nama, email, password	Buat akun	signUp(); buat row profiles	Validasi live; redirect / dashboard
4	Dashboard	Baca greeting, tap quick mood	Lihat kondisi hari ini	Fetch profiles dari DB	Greeting personal + streak
5	Check-in	Pilih tidur, mood, kekhawatiran	Catat kondisi harian	INSERT mood_entries; RPC increment_streak	Summary + CTA Sesi Cerita
6	Sesi Cerita	Ketik pesan ke MinDora	Curhat / didengar	POST /api/chat ! Gemini AI	Balasan empatik MinDora
7	Intensitas	Tap skor (1–5) saat AI bertanya	Ekspresikan berat beban	Zona terdeteksi; MinDora respons	Chat berlanjut sesuai zona
8	Akhiri Sesi	Tap "Akhir" di header	Selesai curhat	INSERT chat_sessions; UPDATE session_count; POST /api/insights	Zone result screen
9	Smart Routing	Tap CTA sesuai zona	Langkah selanjutnya	Kuning ! psikolog; hijau ! dashboard	Halaman tujuan

2.2 Journey B — Booking Psikolog


#	Tahap	Aktivitas Pengguna	Respons Sistem	Output
1	Daftar Psikolog	Filter/cari psikolog	Filter di frontend	Kartu profesional terfilter
2	Profil Profesional	Tap kartu, pilih slot & tipe sesi	Tampilkan detail lengkap	Profil + slot jadwal interaktif
3	Konfirmasi	Centang syarat, tap "Bayar"	Fetch Snap token dari MidTrans	Snap payment popup terbuka
4	Pembayaran	Pilih metode, selesaikan	Snap proses; webhook diterima	Booking tersimpan; success screen

2.3 Journey C — Upgrade Premium & Akses Forecast

#	Tahap	Aktivitas Pengguna	Respons Sistem	Output
1	Dashboard	Tap Mood Forecast (terkunci)	Redirect ke /premium	Halaman paywall
2	Premium Page	Tap "Upgrade ke Premium"	Fetch Snap token	Popup pembayaran MidTrans
3	Bayar	Selesaikan pembayaran (kartu uji)	Webhook ! is_premium = true	Success screen
4	Forecast	Kembali, akses Mood Forecast	Fetch 60 hari data; generate forecast	7-day prediction cards

Visualisasi Alur Utama

Journey A — Pengguna Pertama Kali:

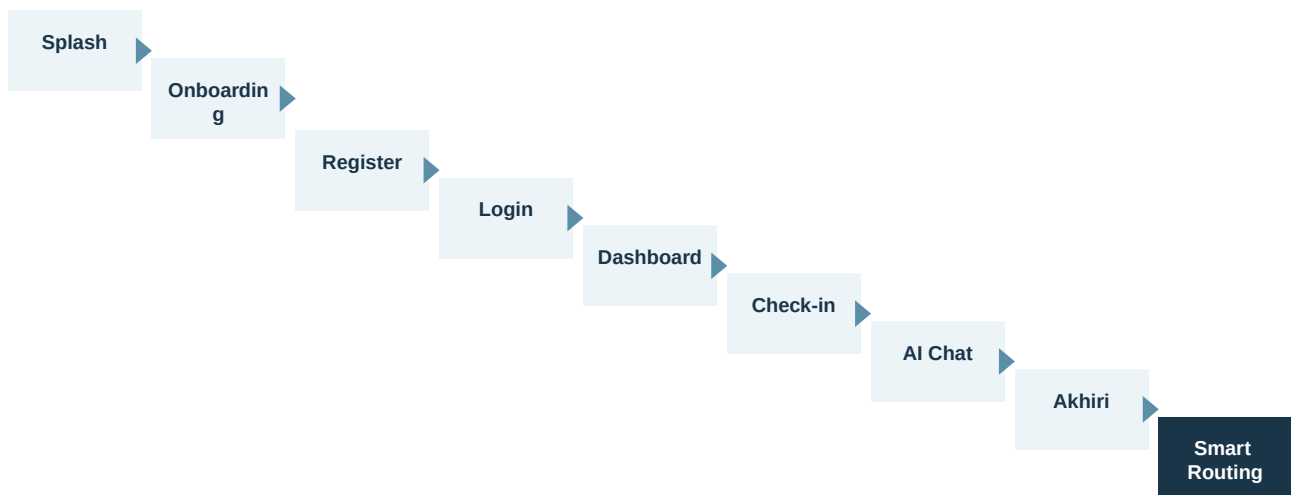

Journey B — Booking Psikolog:



3.1 Workflow Sesi Cerita — Fitur Inti

- 1 Input Pengguna: User mengetik pesan di field chat dan menekan Enter atau tombol kirim.
- 2 Frontend (chat/page.tsx): Append pesan ke state messages[]. Ambil history sebagai ChatHistory[]. POST ke /api/chat dengan {message, history}.
- 3 Backend (app/api/chat/route.ts): Verifikasi session Supabase. Jika pesan pertama (first exchange): SELECT profiles (nama, streak, session_count, ai_notes) + SELECT mood_entries terbaru !' inject sebagai silent exchange pertama dalam history.
- 4 AI Processing (lib/gemini.ts): Coba model gemini-2.5-flash !' gemini-2.0-flash !' gemini-2.0-flash-lite. Terapkan system instruction persona MinDora (listener-first, bahasa santai, jangan tutup sesi). Kirim ke Gemini API. Cek response.includes(['INTENSITY_CHECK']). Strip marker. Return {response, triggerIntensityPicker}.
- 5 Frontend menerima response: Tampilkan bubble MinDora. Jika triggerIntensityPicker = true dan intensity masih null !' tampilkan widget 1–5 dalam chat.
- 6 Intensity & Zone Detection: User tap skor. detectZone(score, allMessages): cek 9 keyword krisis + skor. Jika red !' clear localStorage !' redirect /red-zone. Jika yellow/green !' kirim "[Sistem: intensitas N/5]" ke AI !' lanjut chat.
- 7 Akhiri Sesi: User tap "Akhir". INSERT chat_sessions {messages, intensity_score, zone}. UPDATE profiles.session_count + 1. POST /api/insights (background): Gemini ekstrak insights !' UPDATE profiles.ai_notes (JSONB).
- 8 Output: Zone result screen overlay. Navigate: kuning !' /dashboard/psikolog; hijau !' /dashboard.

3.2 Workflow Morning Check-in

- 1 User tap salah satu dari 5 quick mood di dashboard !' redirect ke /dashboard/checkin.
- 2 Step 1: user pilih sleep quality 1–5. Step 2: pilih mood dari 6 opsi. Step 3: pilih ada/tidak kekhawatiran + textarea opsional.
- 3 Tap "Selesai" !' Supabase getUser() !' INSERT mood_entries {user_id, sleep_quality, emotion, has_concern, concern_text, date}.
- 4 RPC increment_streak(user_id) !' UPDATE profiles.streak di Supabase DB.
- 5 Done screen: tampilkan summary card (tidur, mood, kekhawatiran) + CTA "Mulai Sesi Cerita" | "Nanti aja".

3.3 Workflow Cross-session Memory (AI Notes)

- 1 Setiap akhir sesi chat !' fire-and-forget fetch POST /api/insights {messages: UIMessage[]}.
- 2 Backend /api/insights/route.ts: SELECT profiles.ai_notes (JSON existing) untuk user bersangkutan.
- 3 extractUserInsights(messages, existingNotes): filter pesan user saja !' prompt Gemini untuk ekstrak: interests, stressors, situation, coping_strategies, personality_notes, personal_context !' parse JSON response !' merge dengan existingNotes.
- 4 UPDATE profiles.ai_notes = mergedNotes di Supabase.
- 5 Sesi berikutnya (first exchange): ai_notes diinject ke konteks sebagai "[Catatan tentang user dari sesi-sesi sebelumnya]" di Supabase chat context dan Gemini akan menggunakannya ulang.

3.4 Workflow Pembayaran (Booking / Upgrade Premium)

- 1 User tap "Konfirmasi & Bayar" (booking) atau "Upgrade ke Premium" (paywall).
- 2 Frontend POST /api/payment/create-token {professional_id, amount, user_name, user_email, item_name}.
- 3 Backend: autentikasi Supabase !' buat request ke MidTrans Snap API (server key MIDTRANS_SERVER_KEY) !' return {token: snap_token}.
- 4 Frontend: window.snap.pay(token, {onSuccess, onPending, onError, onClose}).

- 5 MidTrans menampilkan Snap popup !' user memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi.
 - 6 MidTrans POST notifikasi ke /api/payment/webhook (notification URL yang dikonfigurasi di dashboard MidTrans).
 - 7 Backend /api/payment/webhook: verifikasi signature !' UPDATE bookings.payment_status. Jika premium: UPDATE profiles.is_premium = true.
 - 8 onSuccess callback di frontend !' tampilkan success screen (state 'success').
-


Fitur	Status	Cara Kerja	Dependensi	Keterbatasan
Autentikasi Email/ Password	' Lengkap	supabase.auth.signInWithPasswor d / signUp	Supabase Auth	Email confirmation harus dikonfigurasi di Supabase dashboard
Autentikasi Google OAuth	' Lengkap	signInWithOAuth({provider:'google' }) + PKCE callback di /auth/ callback	Supabase OAuth, Google Cloud Console	Redirect URL harus terdaftar di kedua platform
Password Requirements Live Check	' Lengkap	Regex real-time check saat user mengetik (4 kriteria)	React state + useEffect	—
AI Chat (MinDora)	' Lengkap	Gemini API via server route; system instruction; model fallback 3 tier	Gemini API key, @google/generative- ai npm	Rate limit pada free tier; fallback otomatis antar model
Konteks Sesi Pertama	' Lengkap	Inject nama, streak, mood terakhir, ai_notes sebagai silent exchange di first message	Supabase DB read	Hanya diinject di pesan pertama setiap sesi baru
AI-Driven Intensity Picker	' Lengkap	MinDora embed [INTENSITY_CHECK] ketika timing tepat; API strip marker; frontend tampilkan widget	Gemini response parsing	AI mungkin tidak selalu trigger; tidak ada fallback paksa
Zona Deteksi (Hijau/ Kuning/Merah)	' Lengkap	detectZone(intensity, text): cek 9 keyword krisis + skor intensitas	lib/gemini.ts	Keyword list terbatas (9 kata)
Smart Routing	' Lengkap	Kuning !' /psikolog; merah !' /red-zone (auto); hijau !' /dashboard	React Router (Next.js)	—
Persistensi Chat (localStorage)	' Lengkap	Auto-save setiap pesan perubahan; restore jika usia < 24 jam; clear saat akhiri	Browser localStorage	Tidak sinkron antar device; hilang jika clear cache
Morning Check-in	' Lengkap	3-step form; INSERT mood_entries; RPC increment_streak	Supabase DB	Tidak ada validasi duplikat per hari
Streak Check-in	' Lengkap	RPC increment_streak(user_id) dipanggil setiap check-in	Supabase RPC	Logika streak sepenuhnya di DB-side
Jurnal Kalender	' Lengkap	Fetch mood_entries + chat_sessions; build calendar grid; emoji per hari	Supabase DB	Tidak ada fitur export atau share
Cross-session Memory (ai_notes)	' Lengkap	Gemini ekstrak insight per sesi; merge & simpan ke profiles.ai_notes JSONB	Gemini API, Supabase JSONB	Kolom ai_notes perlu migrasi SQL manual: ALTER TABLE profiles ADD COLUMN ai_notes jsonb DEFAULT '{}'
Daftar Profesional	' UI Lengkap	Filter + search diproses sepenuhnya di frontend	Data masih hardcoded (3 profesional)	Belum terhubung ke tabel DB dinamis; data statis

Booking & Pembayaran	' Lengkap	MidTrans Snap; server-side token creation; webhook handler; simpan ke DB	MidTrans API keys, midtrans-client npm, Supabase	Saat ini Sandbox; belum Production; belum ada manajemen jadwal nyata
Mood Forecast	' Lengkap (Premium)	Fetch 60 hari data; algoritma pola mingguan; 7-day prediction	Supabase, lib/forecast.ts	Akurasi bergantung volume data historis; < 7 hari = prediksi kurang presisi
Premium Gate	' Lengkap	Cek profiles.is_premium; redirect ke /premium jika false	Supabase DB	—
Pembayaran Premium	' Lengkap	MidTrans Snap; onSuccess callback !' UPDATE is_premium = true	MidTrans, Supabase	Sandbox only; belum ada manajemen renewal/langganan berulang
Notifikasi	' Lengkap (UI)	Fetch notifications table; grouping; auto-mark-as-read	Supabase DB	Belum ada push notification aktif; pengisian notifikasi perlu trigger eksternal
Profil (8 sub-halaman)	' Lengkap	Update DB melalui Supabase; preferensi bahasa di localStorage	Supabase Auth + DB	—
Komunitas	& p Placeholder	Halaman statis dengan teks "segera hadir"	—	Tidak ada fungsionalitas sama sekali
Laporan Bulanan	& p Belum Ada	Disebutkan di UI dashboard tapi route /dashboard/report belum dibuat	—	Link menuju halaman tidak ada (404)
Lupa Password	& p Placeholder	Tombol ada di login page tetapi tanpa handler/action	—	Fungsionalitas belum diimplementasikan

No	Nama Screen	Wajib?	Alasan Akademik	Keterangan yang Perlu Terlihat
1	Splash Screen	Wajib	Bukti entry point & branding	Logo MinDora, tagline, background navy, 3 loading dots
2	Onboarding Slide 1	Wajib	Bukti onboarding & value proposition	Emoji Ø>ÝØ, headline, progress dot posisi 1 dari 3
3	Onboarding Slide 3	Wajib	Bukti penjelasan fitur kepada pengguna baru	Slide terakhir, tombol "Mulai", progress dot penuh
4	Register + Password Checker	Wajib	Bukti validasi & keamanan akun	Live checklist: beberapa ' beberapa + (saat user mengetik)
5	Login — Form	Wajib	Bukti sistem autentikasi	Form email+password, tombol Google OAuth, link daftar
6	Login — Error State	Rekomen.	Bukti error handling autentikasi	Pesan merah "Email atau password salah. Coba lagi ya."
7	Dashboard (Free User)	Wajib	Bukti home screen & personalisasi	Nama user, tanggal, 5 quick mood, Mood Forecast terkunci Ø=Ý
8	Dashboard (Premium)	Wajib	Bukti fitur premium unlocked	Card Mood Forecast aktif tanpa gembok, badge premium
9	Check-in Step 1 (Tidur)	Wajib	Bukti Expression System — tidur	Progress bar 1/3, 5 pilihan dengan emoji tidur
10	Check-in Step 2 (Mood)	Wajib	Bukti Expression System — emosi	Grid 6 emosi, salah satu dipilih (highlight biru)
11	Check-in Step 3 (Khawatir)	Wajib	Bukti Expression System — kekhawatiran	Tombol Ya/Tidak, textarea terbuka karena "Ya" dipilih
12	Check-in Selesai	Wajib	Bukti output check-in & smart routing	Summary card (tidur, mood, kekhawatiran) + CTA
13	Chat — Greeting Awal	Wajib	Bukti AI Response pembuka	Bubble pertama MinDora, input kosong, tombol "Akhir"
14	Chat — Percakapan	Wajib	Bukti AI Conversation System	3–4 bubble; respons empatik MinDora harus terlihat panjang
15	Chat — Typing Indicator	Rekomen.	Bukti UX real-time feedback	3 titik animasi di bubble MinDora saat mengetik
16	Chat — Intensity Picker	Wajib	Bukti AI-driven intensity assessment	Widget 1–5 muncul dalam alur chat, belum ada dipilih
17	Chat — Pasca Intensitas	Wajib	Bukti MinDora merespons skor empatik	Balasan MinDora pasca intensitas; chat berlanjut (bukan berakhir)
18	Chat — Zone Hijau	Wajib	Bukti Mood Analysis & Smart Routing hijau	Overlay zona hijau, pesan "Makasih udah cerita", toggle simpan
19	Chat — Zone Kuning	Wajib	Bukti Smart Routing ke psikolog	Overlay zona kuning, CTA "Ya, hubungkan aku" terlihat
20	Zona Merah	Wajib	Bukti mekanisme krisis & hotline	Pesan empati, tombol psikiater, nomor 021-7884-5555 terlihat
21	Jurnal — Kalender	Wajib	Bukti Mood Analysis historis	Grid kalender, beberapa hari berisi emoji mood (min 3 hari)


22	Jurnal — Detail Hari	Wajib	Bukti detail mood analysis per hari	Card check-in (tidur+mood) + card sesi (zona+intensitas)
23	Daftar Profesional	Wajib	Bukti Smart Routing ke profesional	Filter chips, 3 kartu profesional dengan info lengkap
24	Profil Profesional	Wajib	Bukti detail profesional & booking	Bio, tags, stats, slot jadwal (satu terpilih/highlight)
25	Konfirmasi Booking	Wajib	Bukti alur pembayaran	Detail sesi + sandbox notice + checkbox syarat
26	MidTrans Snap Popup	Wajib	Bukti integrasi payment gateway	Popup Snap terbuka, metode pembayaran terlihat
27	Booking Berhasil	Wajib	Bukti alur booking end-to-end	Success screen dengan nama psikolog dan Ø<ß%
28	Mood Forecast (Premium)	Wajib	Bukti fitur premium Mood Analysis	7-day cards dengan emoji + % akurasi, prevention plan
29	Profil Utama	Wajib	Bukti user profile system	Avatar, nama, badge premium/free, stats, menu 4 section
30	Notifikasi	Rekomen.	Bukti sistem notifikasi	Daftar notifikasi dengan grouping waktu dan ikon
31	Status Langganan	Rekomen.	Bukti manajemen premium	Tabel fitur free vs premium, status aktif/terkunci
32	Premium Paywall	Wajib	Bukti monetization gate	8 fitur, harga Rp 29.000, tombol upgrade, sandbox notice

6.1 Alur Authentication

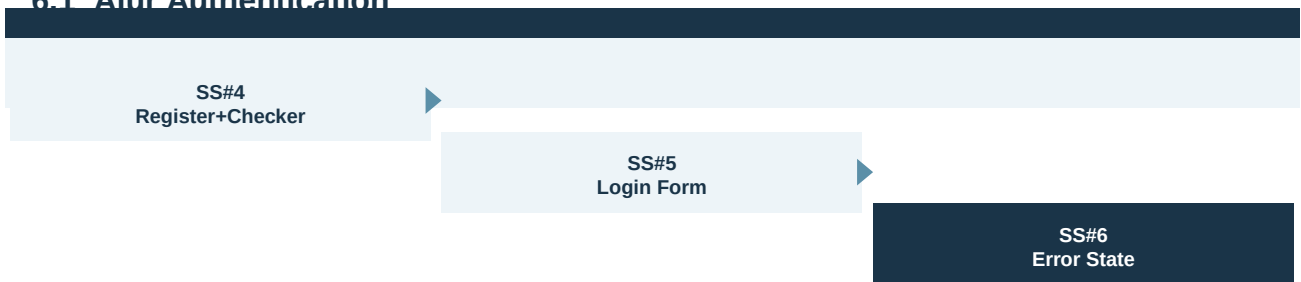


Catatan: Pada screenshot register (#4), pastikan live password checklist terlihat dengan beberapa kriteria terpenuhi (') dan beberapa belum (+). Ketik sebagian password agar checklist aktif sebelum mengambil screenshot

6.2 Alur Morning Check-in — Expression System

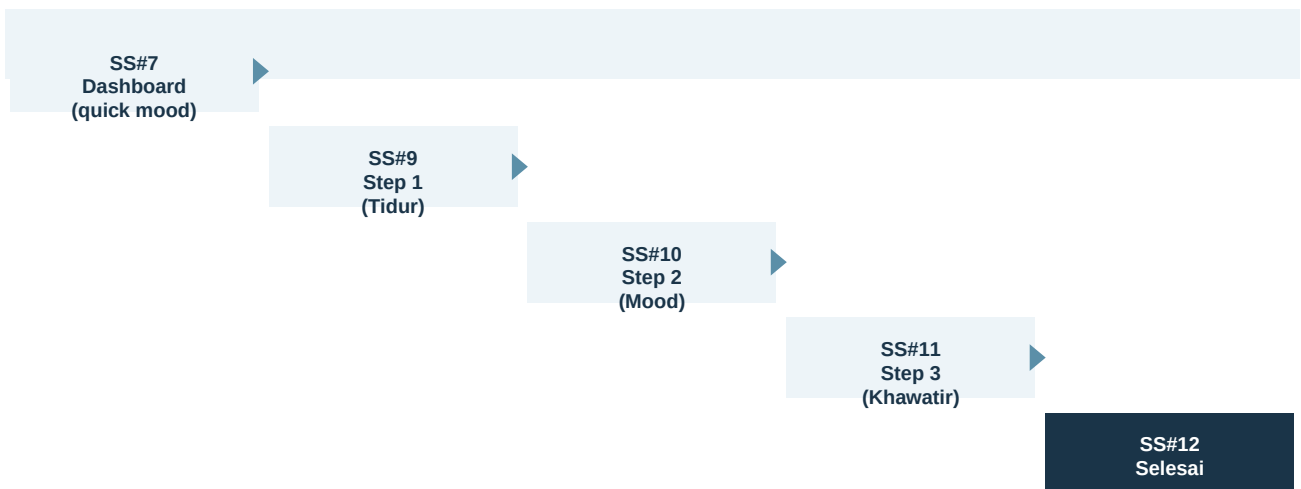


Catatan: Ambil Step 2 (SS#10) setelah salah satu emosi diklik agar highlight border biru terlihat. Step 3 (SS#11): pastikan textarea muncul (pilih "Ya, ada" terlebih dahulu).

6.3 Alur AI Chat + Intensitas + Smart Routing

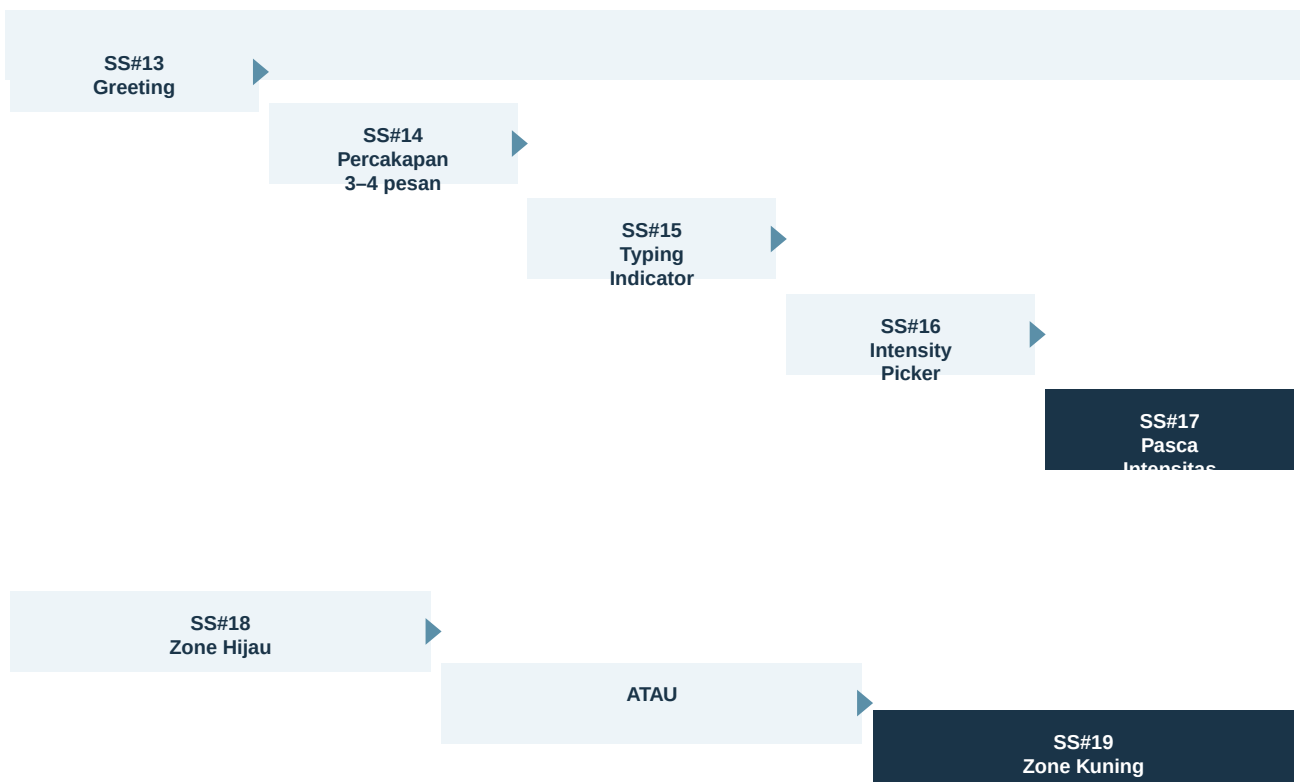


Catatan: Untuk SS#14 (percakapan), pastikan respons MinDora terlihat panjang dan empatik — bukan satu kalimat pendek. Ini penting untuk membuktikan kualitas AI Response. Untuk zone kuning (SS#19), pilih skor intensitas 3 atau 4.

6.4 Alur Smart Routing ke Psikolog

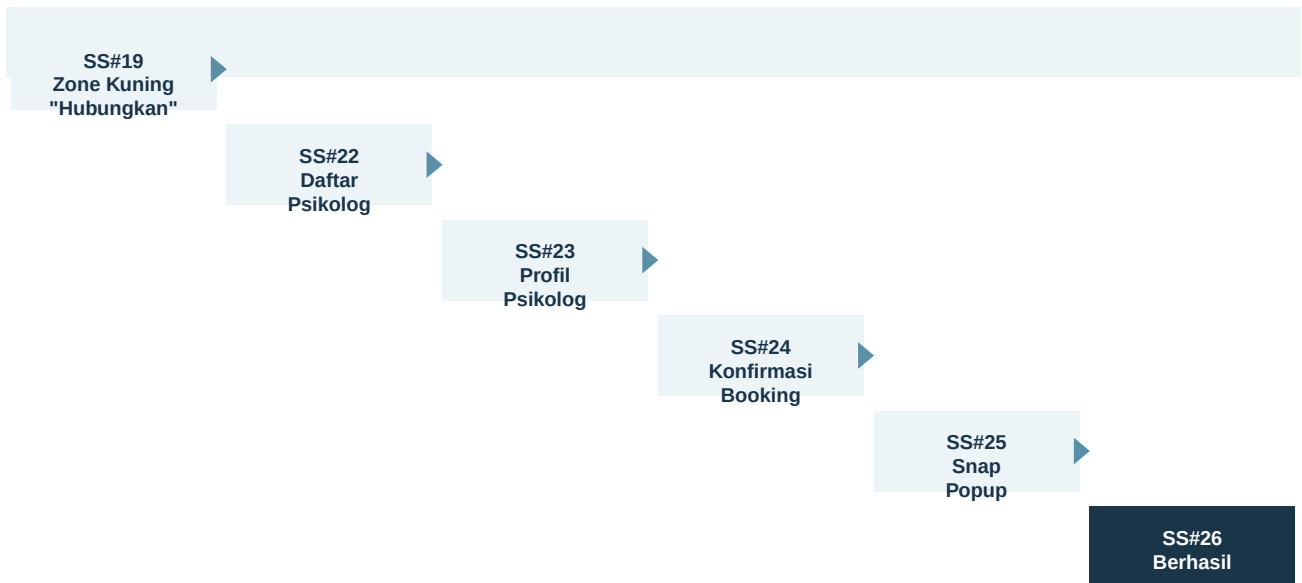

Catatan: Untuk SS#23 (profil profesional), pastikan salah satu slot jadwal sudah diklik (highlight navy) sebelum screenshot agar tombol "Buat Janji Sekarang" aktif


6.5 Alur Mood Analysis (Jurnal & Forecast)

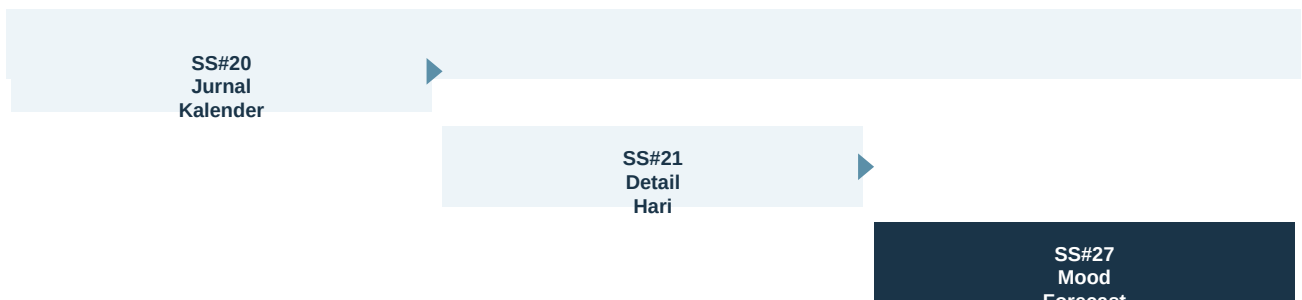

Catatan: Untuk Jurnal (SS#20), lakukan minimal 3 hari check-in terlebih dahulu agar kalender terlihat berisi data dan emoji mood. Untuk Forecast (SS#27), akun harus sudah premium dan memiliki riwayat check-in.

7.1 Diagram 1 — Arsitektur Sistem

Tipe yang direkomendasikan: Layered Architecture Diagram (3 lapisan). Gambarkan dari atas ke bawah:

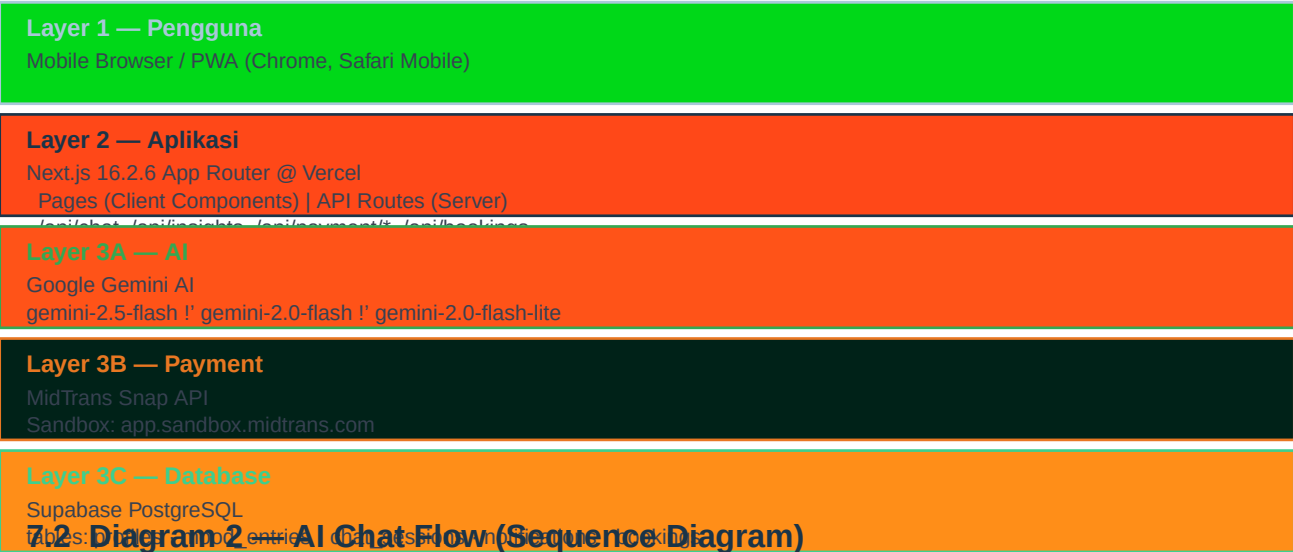


7.2 Diagram 2 — AI Chat Flow (Sequence Diagram)

Tipe yang direkomendasikan: UML Sequence Diagram dengan 4 actor vertikal:

- **Step 1:** User kirim pesan !' Frontend POST /api/chat {message, history}
- **Step 2:** API Route: verifikasi session Supabase Auth
- **Step 3:** API Route: jika first exchange !' SELECT profiles + mood_entries !' inject konteks
- **Step 4:** API Route !' Gemini: system instruction + history + user message
- **Step 5:** Gemini !' API Route: teks respons [+ INTENSITY_CHECK jika tepat]
- **Step 6:** API Route: strip marker !' return {response, triggerIntensityPicker}

7.3 Diagram 3 — Smart Routing Decision Tree

Tipe yang direkomendasikan: Flowchart dengan diamond decision nodes.

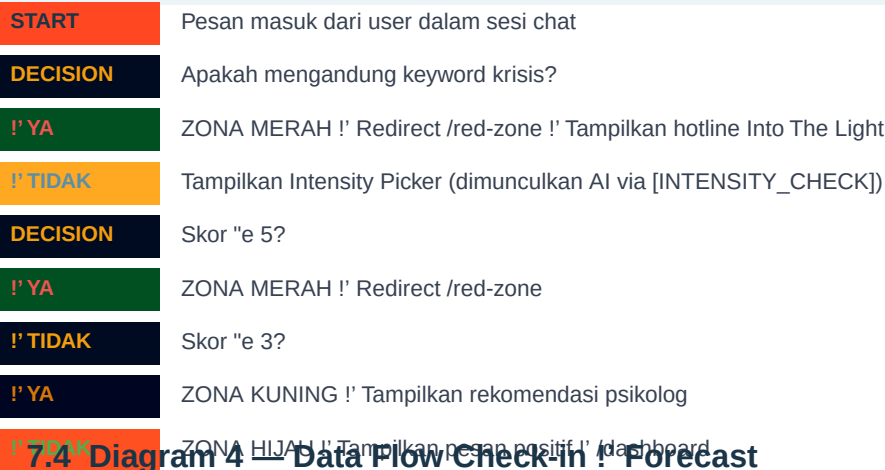

7.4 Diagram 4 — Data Flow Check-in !' Forecast

Tipe yang direkomendasikan: Data Flow Diagram (DFD) Level 1.

- **INPUT A:** Morning Check-in !' mood_entries (date, emotion, sleep_quality, has_concern, concern_text)
- **INPUT B:** Chat Session !' chat_sessions (zone, intensity_score, messages, created_at)
- **MERGE:** Forecast Page: fetch 60 hari kedua sumber. Prioritas: mood_entries > chat_sessions (tanggal sama)
- **PROCESS:** generateForecast(mergedData, weekOffset): analisis pola per hari dalam seminggu (0–6), hitung frekuensi emosi, kalkulasi probabilitas (base ± dayPenalty + dataBonus)
- **OUTPUT:** 7-day ForecastDay[] {day, date, emotion, probability, severity} + PreventionPlan {title, description, actions[]}

7.5 Diagram 5 — Payment Flow

Tipe yang direkomendasikan: Swimlane Diagram dengan 4 jalur (User / Frontend / Backend / MidTrans).

- **User:** Tap "Konfirmasi & Bayar" atau "Upgrade ke Premium"
- **Frontend:** POST /api/payment/create-token {professional_id, amount, user info}
- **Backend:** Autentikasi !' buat request ke MidTrans Snap API dengan MIDTRANS_SERVER_KEY !' return {token}
- **Frontend:** window.snap.pay(token, {onSuccess, onPending, onError, onClose})
- **MidTrans:** Tampilkan Snap payment popup !' user pilih metode dan selesaikan
- **MidTrans !' Backend:** POST notifikasi ke /api/payment/webhook dengan signature
- **Backend:** Verifikasi signature !' UPDATE bookings.payment_status; jika premium: UPDATE profiles.is_premium = true
- **Frontend:** onSuccess callback !' tampilkan success screen (state 'success')

